



AirMini™

Tamanho real



AirMini, o menor CPAP do mundo*



Ajuda os pacientes a nunca esquecerem a terapia do sono

Você sabia que metade dos usuários de CPAP não levam seus aparelhos com eles toda vez que viajam? É um problema sério


quando se considera a miríade de benefícios para a saúde e a qualidade de vida obtidos com o uso de CPAP todas as noites, mas dificilmente é uma surpresa. Os aparelhos CPAP podem ser inconvenientes para se embalar e ocupam espaço precioso ao tentar levar poucas coisas na viagem. AirMini,™ por outro lado, facilita a embalagem – pesa menos de meio quilo e cabe facilmente em qualquer bagagem de mão.

Dados de estudo de preferência do paciente pelo AirMini

Quando os pacientes usam o AirMini em viagem, eles podem esperar os mesmos modos de terapia comprovados encontrados em nossos dispositivos Air10™ líderes de mercado: CPAP, AutoSet™ e AutoSet for Her. E quando testados em comparação a dois PAPs para viagem líderes de mercado, 4 dos 5 pacientes preferiram o AirMini.²

Os pacientes também preferiram o AirMini nestas categorias principais:²



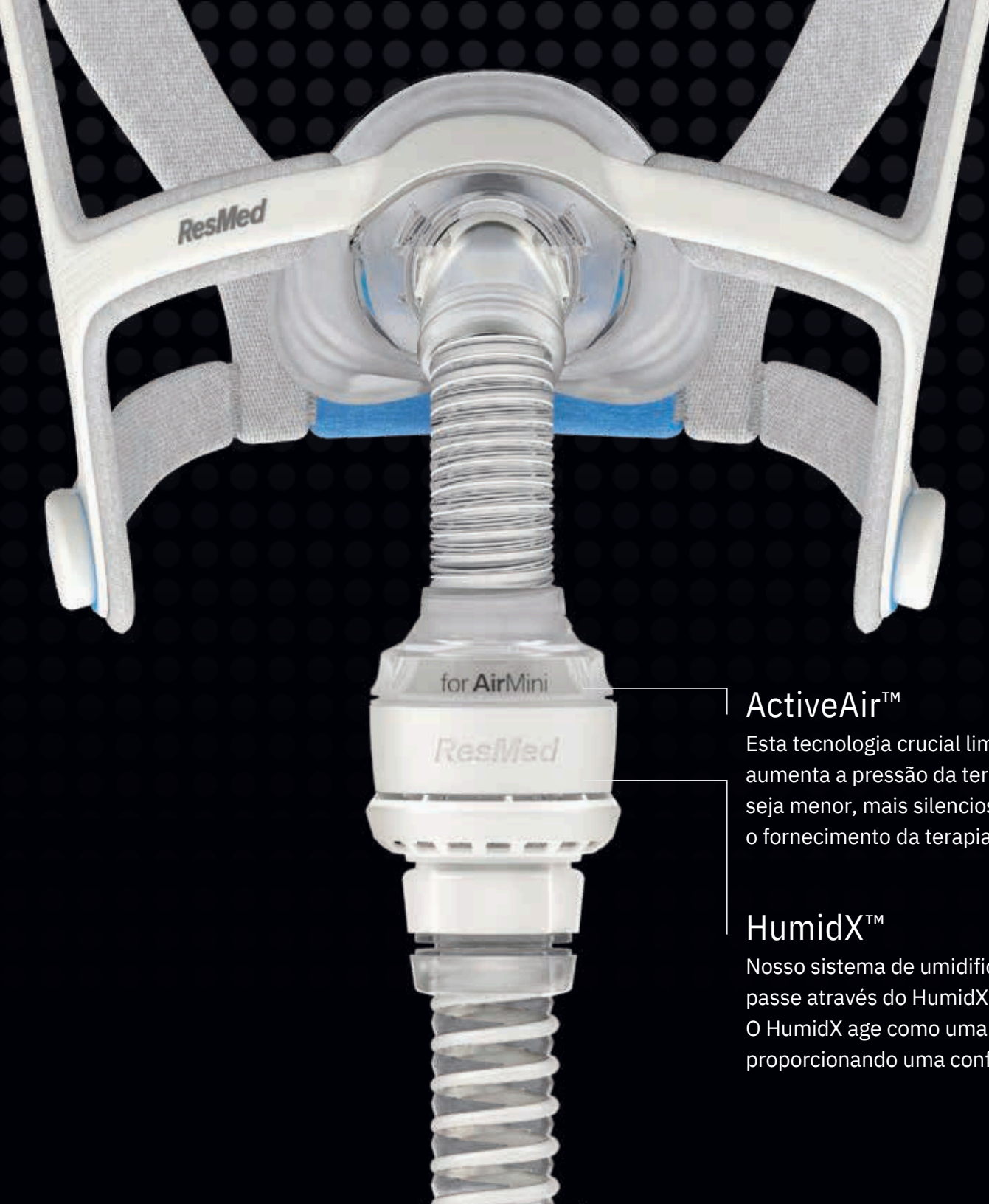


ActiveAir™

Esta tecnologia crucial limita o fluxo da terapia, enquanto ainda aumenta a pressão da terapia, o que permite que o sistema seja menor, mais silencioso e mais eficiente, sem comprometer o fornecimento da terapia ou as mudanças de pressão.


HumidX™

Nosso sistema de umidificação sem água permite que o ar exalado passe através do HumidX antes de atingir o respirador da máscara. O HumidX age como uma fonte de umidade por toda a terapia, proporcionando uma confortável experiência terapêutica portátil.†

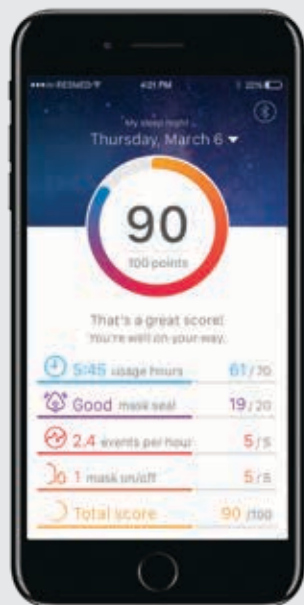


App AirMini

Os pacientes podem baixar o app AirMini em seu dispositivo inteligente, para controlar uma série de ajustes de conforto. Os usuários recebem suas pontuações todas as manhãs e podem acessar os últimos 30 dias de dados sobre o sono, ajudando-os a ficarem engajados na terapia.

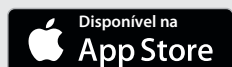

AirMini no AirView

Fornecedores de equipamentos e médicos podem visualizar os dados da terapia no AirView™ para pacientes que optaram por participar. O AirView oferece assistência oportuna para ajudar a melhorar os desfechos do paciente. Isso garante que não haja lacunas no monitoramento de dados quando o paciente estiver longe de casa.

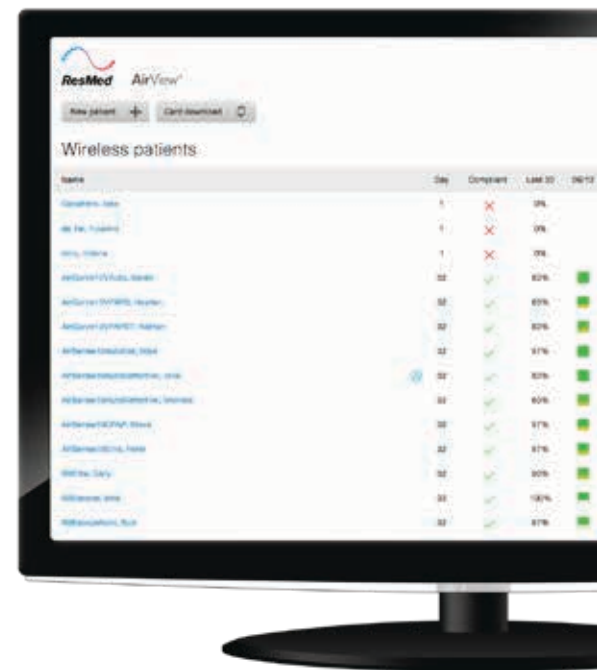

Máscaras compatíveis com AirMini

Os pacientes podem escolher opções de máscara oronasal, nasal e almofadas nasais – cada uma desenvolvida para fornecer uma terapia confortável e estável:



AirFit™ F20
AirTouch™ F20



AirFit F30



AirFit N20



AirFit N30
para AirMini



AirFit P10
para AirMini




Tecnologia ActiveAir

O ActiveAir é a tecnologia de ventilação dentro do AirMini que reduz o fluxo desperdiçado associado às aberturas de máscara padrão e permite que o AirMini seja tão pequeno. As máscaras CPAP típicas têm as “portas de exalação” que permitem que o CO₂ exalado pelo paciente seja eliminado, para evitar que o paciente o respire novamente. Nesse cenário, o motor CPAP precisa fornecer ar suficiente para superar esse vazamento e fornecer a quantidade adequada de pressão para o paciente.

Por outro lado, o ActiveAir tem uma membrana de silicone flexível que reduz o fluxo de ventilação em alta pressão, para ajudar a minimizar o trabalho do motor. Isso permite que o AirMini forneça a mesma terapia do AirSense10™ a pressões mais altas, ajudando a garantir que o paciente receba o nível prescrito de tratamento.



Flujo de ventilación en comparación con presión

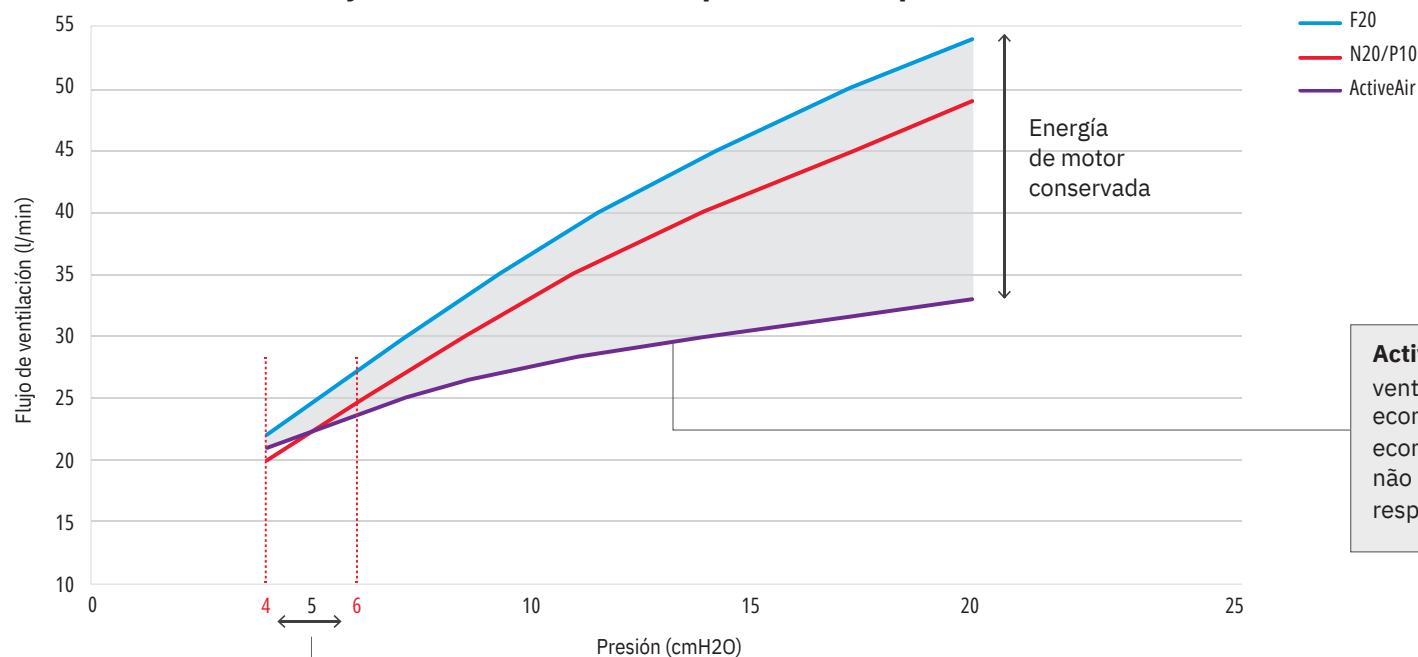

ActiveAir retarda o fluxo de ventilação a partir de 6 cmH₂O para economizar energia. A energia economizada compensa vazamentos não intencionais e variações na respiração do paciente, se necessário.

O ActiveAir mantém o fluxo ideal mesmo em baixas pressões

Sistema de ventilação ActiveAir™



Umidificação sem água HumidX

A umidificação é um recurso importante que tem demonstrado melhorar o conforto e a conformidade do paciente.³ Viajar pode dificultar o uso da umidificação tradicional, pois pode ser necessário encontrar água destilada durante a viagem. É por isso que o AirMini apresenta um sistema de umidificação para HumidX† sem água que permite que o ar exalado passe através do HumidX antes de atingir a ventilação da máscara.



Cartucho para as máscaras F20

Substitua a cada 30 dias* (após abrir a embalagem)

HumidX‡/HumidX F20**

- Umidificação padrão
- Adequado para qualquer clima
- Recomendado no início do tratamento se o paciente desejar umidificação

HumidX Plus‡

- Umidificação aprimorada
- Recomendado para ambientes secos e frios
- Recomendado para pacientes que alcançam resultados inadequados com HumidX



Cartucho para as máscaras nasais e almofadas nasais



Discutindo o AirMini com seus pacientes

Encorajamos você a discutir sobre o AirMini com seus pacientes durante a prescrição, bem como as consultas de acompanhamento, como uma opção de CPAP para viagem de alta qualidade.

Para obter mais informações, seus pacientes podem acessar ResMed.com/AirMini.



espacoquallys.com.br/airmini